

estudio de la integridad intestinal (x10 muestreos)

incluye



x10 microtubos Eppendorf
con preservante de ácidos
nucleicos (RNAlater)



x10 palos
de madera
desechables



x10 pares
de guantes
sin polvo

PRECAUCIONES ESPECIALES

- ⚠ Realiza el proceso lo más rápido posible para evitar la degradación del material
- ⚠ Identifica correctamente la muestra con rotulador indeleble

PASOS A SEGUIR




1. Toma las heces directamente del recto con guantes sin polvo

- ⚠ es necesario cambiar de guantes entre muestra y muestra



2. Recoge 100mg de heces (hasta llegar a la marca) con el palo

- ⚠ si se supera la cantidad puede saturarse el preservante y provocar la degradación de la muestra

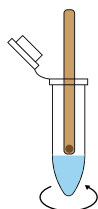

3. Introduce el palo con la muestra en el microtubo y homogeneízala agítandolo suavemente

4. Refrigeras las muestras (4°C) hasta su llegada al laboratorio

- ⚠ no congelar la muestra para dejar actuar al preservante